

Dansk manual til ASG Mini Massagepistol



**SAVE THIS MANUAL KEEP THIS MANUAL FOR SAFETY
WARNINGS, PRECAUTION OPERATING, INSPECTION,
MAINTENANCE AND CLEANING PROCEDURES.**

Vigtige sikkerhedsinformationer

GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER


Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og instruktioner kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig reference.

Advarslerne, forholdsreglerne og instruktionerne i denne vejledning kan ikke dække alle mulige forhold og situationer, der kan opstå.

Det skal forstås af operatøren, at sund fornuft og forsigtighed er faktorer, som ikke kan indbygges i dette produkt, skal leveres af operatøren. Læs omhyggeligt og forstå alle monterings- og betjeningsinstruktioner før brug af dette produkt. Manglende overholdelse af sikkerhedskravene og under grundlæggende forholdsregler kan resultere i alvorlig personskade.

- Kun til brug for voksne
- Brug massagepistolen på en tør og ren overflade af kroppen. Tryk og bevæg forsigtigt på huden.
- Massagetid på de samme muskeldele bør ikke overstige et minut ad gangen.
- Brug ikke massagepistolen på dit hoved eller kropsdele.
- Vælg passende massagehoved til det specifikke behov. Hyppigt højhastighedstryk på ét sted kan forårsage slid. Stop brugen med det samme, hvis du oplever smerter under massage.
- Hold fingre og hår væk fra massageapparatet for at forhindre skade.
- Hold massagepistolen væk fra vand.
- Undersøg massagepistolen for eventuelle skader før hver brug. Brug ikke massageapparat, hvis det er beskadiget.
- Ændringer af denne massagepistol er strengt forbudt.
- Brug ikke højhastigheds gear/udstyr uden lægelig tilladelse, hvis. 1. graviditet, diabetes og komplikationer, ingen neuropati eller optiske læsioner, brug af pacemaker, er blevet opereret, har epilepsi eller migræne, diskusprolaps, afspænding og spondylitis. 2. Nylig ledudskiftning og spiral eller fysiske problemer. Svage voksne og børn skal bruge denne maskine forsigtigt, ledsaget af en sund voksen.
- Kontakt en læge, hvis du er usikker på brugen af massagepistolen.

Brugsanvisning og sikkerhedsinstruktioner

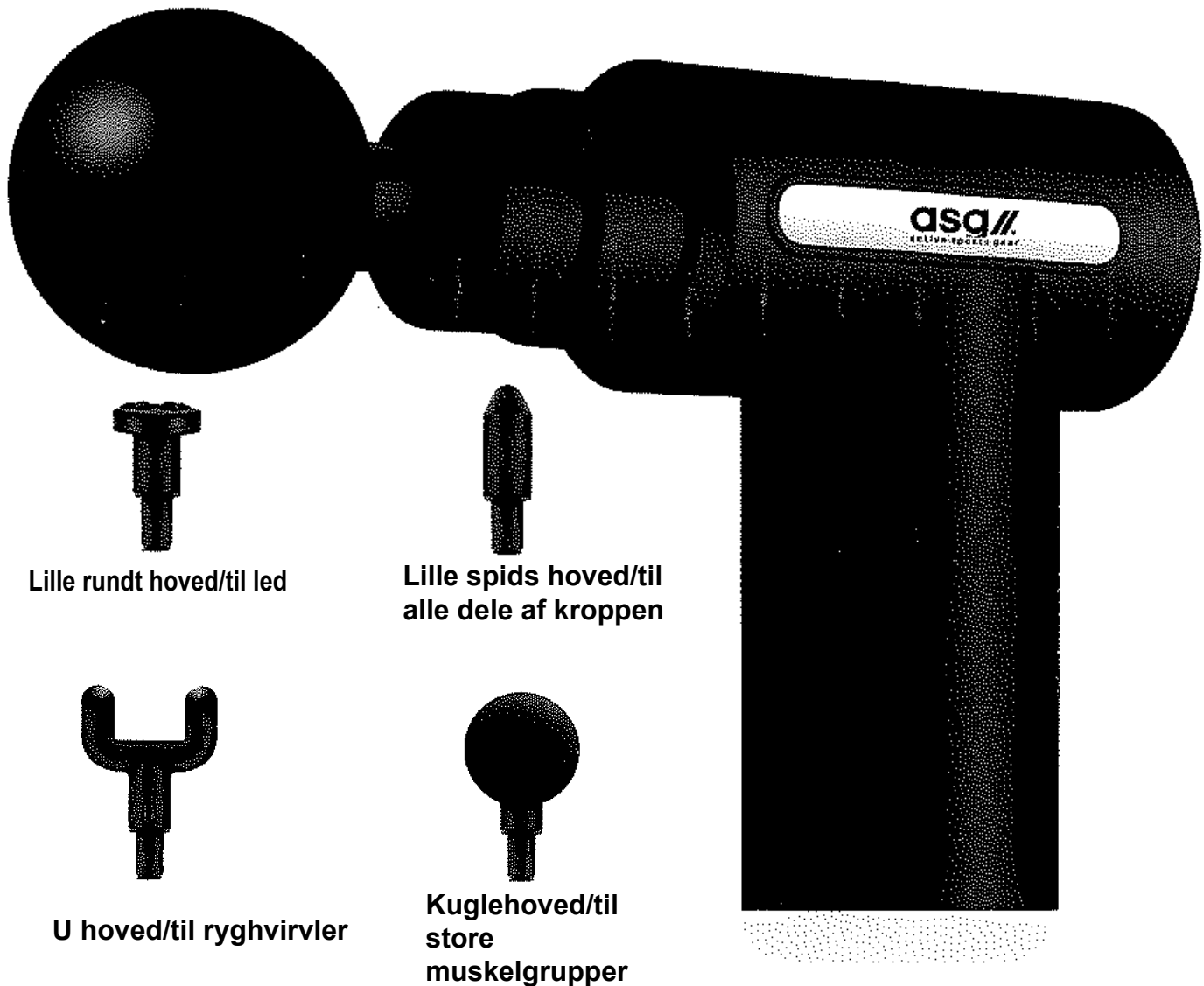

instruktioner

1. Tænd/sluk-knap. [langt tryk for at starte/tryk længe for at slukke]
2. Tryk på nøglegearet for at skifte.
3. Aftageligt og udskifteligt vibratorhoved. Når du skiller vibratoren ad fra hovederne, skal du bare trække den ud med kraft.
4. Vælg venligst 5V ladeudstyr til opladning.
5. For første gang skal du oplade enheden i 3 timer. Tilslut datakablet til 5V-adapteren for opladning.
6. Knaptpe. 6 lys blinker. Når fulde 6 lys vil være tændt. Når du arbejder, viser lysene niveauet.
7. Berøringstype: Ved opladning viser den den elektriske mængde, mens den arbejder. det vises.

Vedligehold

1. Tør overfladen af massagepistolen af med et let fugtigt håndklæde. Tør massageapparatet med en blød tør klud.
2. Når batteriet opbevares i længere tid, skal du genoplade batteriet helt. Opbevar massageapparatet i dens originale emballage.
3. Massageapparatet skal tages tilbage i mindst en halv time efter en times brug. Lad massageapparatet køle af i mindst 30 minutter, før du bruger maskinen igen.

!!!GEM DISSE INSTRUKTIONER!!!



Made in China